




广慈医械  
GUANGCI M.D.


# 不可吸收带线锚钉

## 【适应症】

适用于膝、髓、肩、肘、踝、足、腕和手部手术中骨与软组织的连接固定。

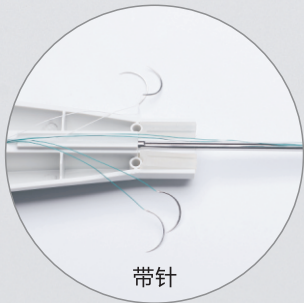

带针

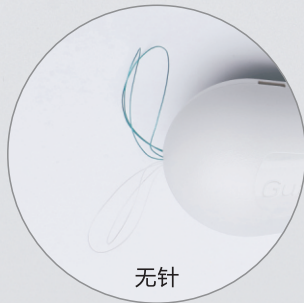

无针

两种形式，供临床选择使用。

**浙江广慈医疗器械有限公司**

ZHEJIANG GUANGCI MEDICAL DEVICE CO.LTD.

地址：浙江省慈溪市周巷镇开发东路189号

电话：0574-63302082

传真：0574-63305338

网站：www.zjgcyl.com

邮编：315324




## 产品特点

### 锚钉:

- ①波形螺纹设计, 方便植入, 提供更强抗拔出力。
- ②钛合金材料, 表面经硬质黑灰色阳极氧化处理, 具有优越的骨结合性, 长期植入稳定。
- ③穿线孔槽采用特殊表面处理, 减少缝线与孔槽摩擦、切断的发生。

### 缝线:

- ①超高分子量聚乙烯材料, 经表面特殊涂层处理, 使缝线光滑、柔顺, 具有卓越的力学性能。
- ②绿白双色缝线, 在手术过程中清晰识别使用。

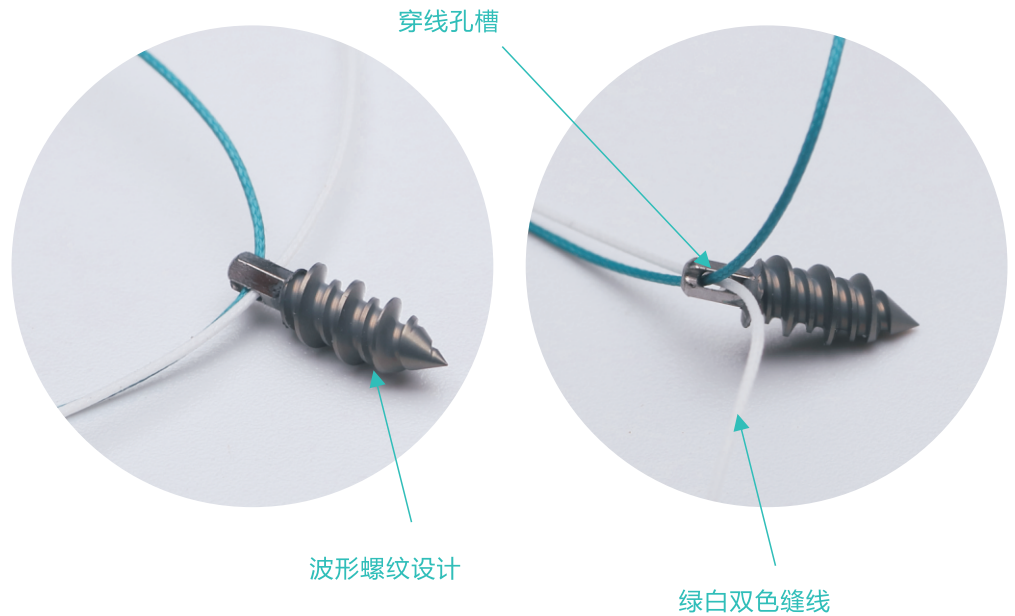

## 不可吸收带线锚钉型式规格及应用推荐

型式代号	规格		适用部位	适应症	
	锚钉	缝线			
MD-20-ZW MD-20-NW	∅2.0	3-0 (带针)	掌指骨	手指伸、屈肌腱止点断裂伴指骨末节骨折	
		3-0 (无针)	腕骨	经桡骨茎突月骨周围骨折伴脱位	
			足		趾骨骨折伴趾间韧带撕裂
					足副舟骨切除联合带线锚钉治疗舟骨疼痛综合征
				拇外翻矫形重建	
MD-28-ZW MD-28-NW	∅2.8	2-0 (带针) 2-0 (无针)	锁骨	不稳定型锁骨远端骨折, 肩锁韧带、喙锁韧带撕裂	
			腕骨	腕关节骨折合并舟月韧带骨折	
			桡骨	桡骨头骨折重建侧副韧带治疗肘关节恐怖三联征	
			肱骨	肱骨近端骨折伴肩袖撕裂、肱三头肌肌腱断裂	
			踝关节		腓骨远端骨折伴外侧副韧带腓骨止点撕裂
					单纯后踝骨折
					第五跖骨基底部骨折合并踝关节韧带损伤
	跟骨	跟骨结节撕脱性骨折			